

## **VET Série II ::: SAF-531-VET**

### **Unité dentaire mobiles et autonome pour vétérinaires**

#### **Caractéristiques**

- Compresseurs sans huile, sans maintenance
- Détartreur ultrasonique (piezo) intégré avec 4 embouts
- 2 connexion automatique « Midwest » 4 trous
- Contrôle des pièces à main au pied de type rhéostat
- Seringue air/eau avec embout indexé
- Tubulures faciles à nettoyer, et instruments stérilisables
- 4 supports à instruments à hauteur adéquate de travail
- Système de livraison d'eau avec 2 réservoirs de 2L facile d'accès
- Prise électrique double pour vos accessoires
- Réservoir d'air en acier inoxydable donnant un air plus sec et propre
- 4 roues avec verrous pour un déplacement aisé

#### **Spécifications**


- Poids : ± 80 lbs | ± 36 kilos
- Niveau sonore : ± 56 Db @ 1 mètre
- Voltage : 120 Volts / 60 Hz
- Dimensions : 18" x 11" x 32" | 45.72 x 28 x 82.28 cm
- Compresseurs : 2.64 CFM
- Pression maximale : 80 PSI (5.52 Bar)

#### **Options**

- Lumière DEL pour le détartreur ultrasonique
- Fibre optique pour pièces à main (chaque)
- Couleur personnalisé (plus de 75 couleurs)
- Raccord rapide d'eau extérieur
- Succion venturi avec bouteille de rejet
- Housse protectrice
- Logo personnalisé sur la housse
- Turbine
- Polisseur
- Support à instruments additionnel (chaque)



**Un an de garantie sur défauts de fabrication**

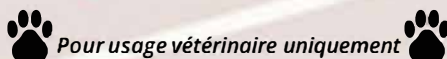

94-D, Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, Canada, J7G 2T3

Version 1.3 ::: 2017-02-07